




レジン支台築造システム
ビューティコア システム



Fluoride Releasing Core Build-up SYSTEM

BeautiCore SYSTEM

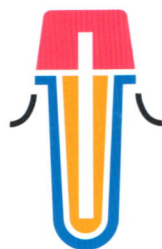

光重合タイプのペーストを加えた
新システム!

SHOFU INC.

コア部と根管部、それぞれに特化したペーストをラインナップ



だから、操作しやすい

ビューティコア フロー プラス F00と
同じく、ゼロフローのペースト性状


コア部には
垂れないのでピタッと
築盛が可能

ビューティコア LC インジェクタブル

超低流動性のフロアブルタイプなので、築盛時に垂れにくく、
形がくずれにくい。

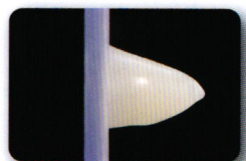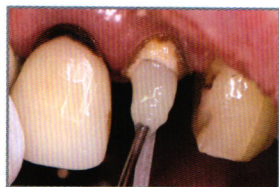

排出したペーストを
垂直にした状態

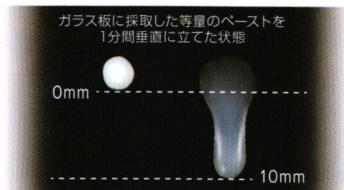


ビューティコア フロー F10と同じく、
ハイフローのペースト性状


根管部には
流動性が高く根管の
隅々まで填入可能な

ビューティコア LC ポストペースト

高流動性タイプなので、根管壁になじみやすい。

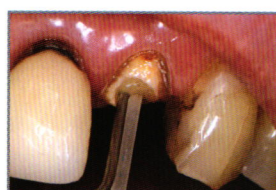


気泡の混入が少ない設計です。

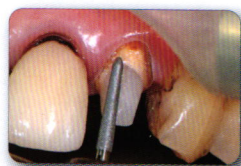

象牙質近似の切
削感でコア部と
歯質の移行部の
形成もスムーズ。

色調は2色をご用意

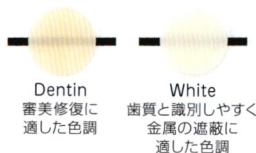

別売

スパチュラでの築盛が容易な
ペーストもご用意

ビューティコア LC ペースト

付形性に優れイメージ通りの
築盛が可能




硬化深度は、4.5mm

透明性が高いため、根管深部までしっかり硬化し、接着します。
(窩洞が4.5mmより深い場合は、数回に分けて填入と光照射をそれぞれ行なってください。)

■窩洞深さと接着強さの関係

象牙質に対する接着強さ (MPa)

光照射 — ビューティデュアルボンド EX — LC ポストペースト

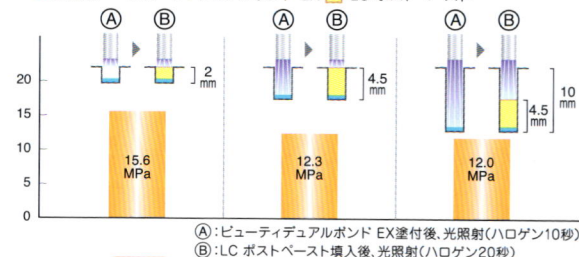

別売

流動性が高い
デュアルキュアタイプ
のペーストもご用意

ビューティコア フローペースト

※ビューティコア フローペーストには
ミキサーとノズル(細)の
装着が必要です。

光が届きにくい
部位に 最適




LC ポストペースト


【支台築造に適した物性を備えております。】

(37℃水中保存24時間後)

咬合圧に耐え得る強さ

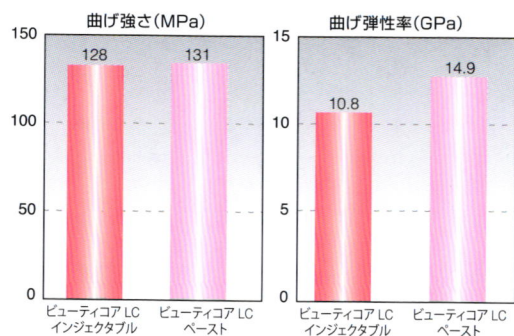

しなやかで、脆弱化した根管歯質にダメージを与えにくい

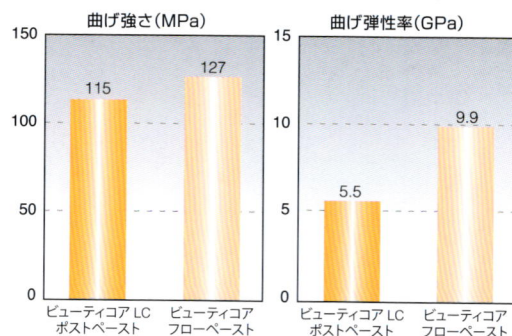

※カタログ掲載のグラフは全て自社試験によるものです。

その他システムラインナップも充実

ビューティデュアルボンド EX

HEMAフリー

デュアルキュア


ビューティコアシステムのペーストはもちろん、充填用コンポジットレジンにも確実に接着します。

ビューティコアシリーズのペースト
〈光重合型〉

ビューティコアシリーズのペースト
〈デュアルキュア型〉

充填用
コンポジットレジン


象牙質に対するせん断接着強度 (MPa)

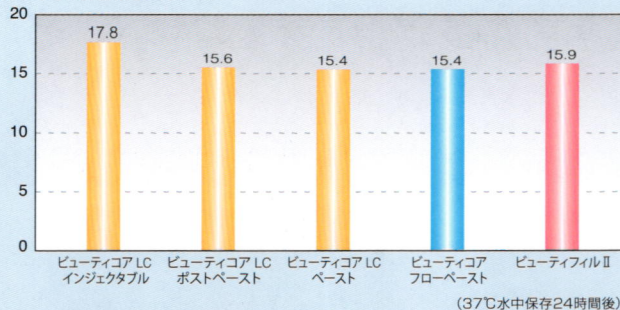

ビューティコア ファイバーポスト

別売

光を透過しやすく、強度の高い素材を採用。
症例により4種類の径から選択できます。

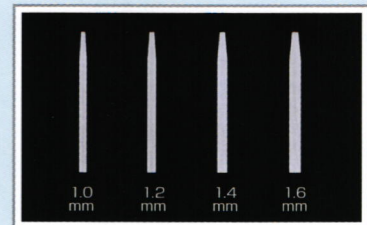


★予後の経過観察に適したX線造影性

例えば、ファイバーポスト1.4mmのX線造影性は厚さ約3mmのアルミニウム板と同等。象牙質のX線造影性は厚さ1mmのアルミニウム板と同等とされているためファイバーポスト1.4mmのX線造影性は象牙質の3倍と考えられます。


主な操作ステップ

(光照射時間など操作術の詳細はセットに、付属の取扱説明書又は添付文書をお読みください。)


直接法

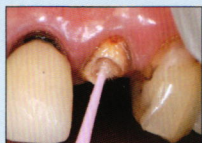

ビューティデュアルボンド EXのボンドA,Bを混合し塗布後、10秒放置→エア乾燥→光照射

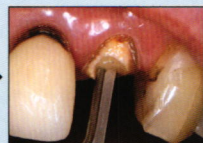

ビューティコア LC ポストペーストの填入及びポストの植立→光照射

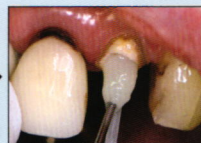

ビューティコア LC インジェクタブルを築盛→光照射



支台歯形成




完成


写真提供: 医療法人社団平和歯科医院 院長 阿部 修 先生



間接法

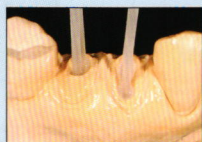

ビューティコア LC ポストペーストの填入及びポストの植立→光照射

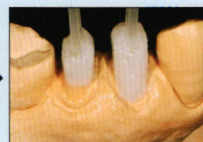

ビューティコア LC ペーストを築盛→光照射



完成

写真提供: 貞光歯科医院 院長 貞光 謙一郎 先生
デンタルプレイズ 代表 日下部 裕 先生



Fluoride Releasing Core Build-up SYSTEM

BeutiCore SYSTEM



写真提供: 貞光歯科医院 院長 貞光 謙一郎 先生

包装・価格

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号	販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
ビューティコアキット EX	歯科用支台築造材料キット	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00149000	ビューティデュアルボンド EX	歯科用象牙質接着材	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00148000
ビューティコア	歯科用支台築造材料	管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00213000	ビューティコア ファイバーポスト	歯科根管用ポスト成形品	管理医療機器 医療機器認証番号 226AKBZX00088000




ビューティコアキット EX ¥13,000

【キット内容】ビューティコア LC インジェクタブル(Dentin) 2.5g
ビューティコア LC ポストペースト 2.1g
ビューティデュアルボンド EX ボンドA 3.0mL
ビューティデュアルボンド EX ボンドB 2.5mL
松風ニードルチップ(太) 5
松風ニードルチップ 5
ディスボブラシ ファイン(ピンク) 50
松風Vディッシュ 25

単品



ビューティコア LC
インジェクタブル
2.5g ¥2,800
(松風ニードルチップ(太)5個付)
【色調】2色

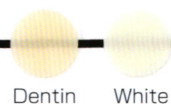

ビューティコア LC ポストペースト
2.1g ¥2,800
(松風ニードルチップ 5個付)



ビューティデュアル ボンド EX
ボンドA 3.0mL ¥4,000
ボンドB 2.5mL ¥4,000



ビューティコア LC
ペースト
4.6g ¥3,200
【色調】2色



ビューティコア フローペースト
9g ¥6,000
【付属品】
松風ミキシングセット ミキサー 20
松風ミキシングセット ノズル(細) 20

デュアルキュア



ビューティコア ファイバーポスト
10入 ¥9,800
【種類(直径)】4種
■1.0mm、■1.2mm、■1.4mm、■1.6mm

松風ニードルチップ(太) 50個...¥1,500 松風ニードルチップ 50個...¥1,500 ディスボブラシ ファイン 100本...¥1,000(色調:イエロー、ピンク) 松風Vディッシュ 25枚...¥800

関連製品

レジセメント



レジセメント ベーシックセット
¥19,000

ファイバーポストの前処理に



松風ポーセレンプライマー
5.0mL ¥5,000

金属製ポストの前処理に



メタルリンク
5.0mL ¥5,000

保険診療でポストを使用される場合は、金属製のポストをお使いください。
カタログに記載の価格は2014年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱店

古見 NOBEOKA
歯科器械店*延岡



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>